

Lesebrillen - Bildschirmbrillen

Blaulichtfilter, Magnetverschluss, einstellbares Gestell und austauschbares, flexibles Nackenband



INDESmed hilft Ihnen, Freude am Alltag zu haben.
Sehhilfen die schön, bequem und gesund sind.





Lesebrillen von INDESmed – Ihre personalisierbare High-Quality Lesebrille mit Blaulichtfilter

Die neuen Brillen von INDESmed sind einfach bequem, schick und für Ihre Augengesundheit optimal. Die **Ergonomie** ihrer Teile und die **Einstellmöglichkeiten** erlauben die Anpassung der Brille der Morphologie jedes Kopfes. Ihre Teile lassen sich auseinander bauen und einstellen. So können Sie das Gestell vom Gummiband trennen und nach Belieben mit anderen Farben kombinieren.

Das **Gestell** ist modern und passt zugleich zu ovalen als auch zu kantigen Gesichtszügen.

Das **Nackenband** besteht aus TPE (Thermoplastische Elastomere), ein Material, das die Eigenschaften von Gummi mit denen von Thermoplasten vereint und somit weich, flexibel aber auch dauerhaft ist. Das Nackenband steht in 6 verschiedenen Farben zur Verfügung und **kann einfach ausgetauscht werden**.

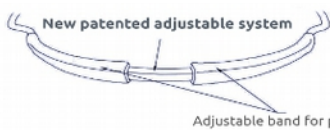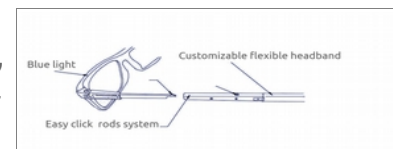


Am hinteren Teil des Bandes befindet sich das **patentierte Einstellungssystem** von INDESmed. Dieses bietet Verlängerungsmöglichkeiten die zu einer perfekten Anpassung der Brille beitragen.

Der **Magnetverschluss** ist mit einem **Neodym-Magneten** ausgestattet, dem stärksten und haltbarsten Magnet zurzeit.



Frontal magnetic connection

Lesebrillen von INDESmed sind mit **Blaulichtfilter** ausgestattet. Blaues Licht ist energiereiches Licht, das Bildschirme aussenden und negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann. Studien zeigen, dass eine Überexposition mit Blaulicht mit einer **Augenbelastung**, einem erhöhten Risiko für Makuladegeneration und einer **Störung des Schlafzyklus** verbunden sein kann. Unsere Linsen filtern blaues Licht, insbesondere die Wellenlängen mit der höchsten Energie von 400-440 nm.

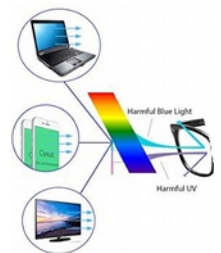

Jede einzelne Brille wird mit Hilfe eines Scheitelbrechwertmesser geprüft, womit höchste Qualität gewährleistet wird.

Korrekturgläser lassen sich auch auf diesem Gestell einbauen.

Die Lesebrillen von INDESmed werden mit einem **Brillenbeutel aus Mikrofaser** zum Aufbewahren, der auch als Brillenputztuch dient, und in einer wiederverwertbaren **Kartonschachtel** geliefert.

Technische Daten

Teil	Angabe
Verfügbare Dioptrien	0 – 1,0 – 1,5 – 2 – 2,5
Linsen	Organische Polymerkristalle, einzeln mit Scheitelbrechwertmesser kontrolliert
Magnetverschluss	Neodym-Magnet
Nackenband	Einstellbar, TPE (Thermoplastische Elastomere) in 6 verschiedenen austauschbaren Farben
Rahmenfarben	Havana braun, blau, schwarz